




Cathéter PICK

Contenu

Qu'est-ce qu'une sonde PICK ?	3
Pourquoi une sonde PICK ?	4
Comment une sonde PICK est-elle insérée ?	4
À quoi dois-je faire attention avec une sonde PICK ?	5
Comment entretenir la sonde PICK ?	5
Quand devez-vous nous contacter ?	6
Retrait de la sonde PICK	7
Contacts utiles	7

Qu'est-ce qu'un cathéter PICK ?

PICK est l'**abréviation de peripherally inserted central catheter** (cathéter central inséré par voie périphérique). Il s'agit d'un tube fin (cathéter) inséré dans un vaisseau sanguin de la partie supérieure du bras. L'extrémité du cathéter sort dans un gros vaisseau sanguin situé juste au-dessus du cœur. Des médicaments ou des solutions nutritionnelles peuvent être administrés par le cathéter dans le cas d'une affection nécessitant un traitement à long terme. Le cathéter PICK reste en place pendant environ 6 semaines à 3 mois.

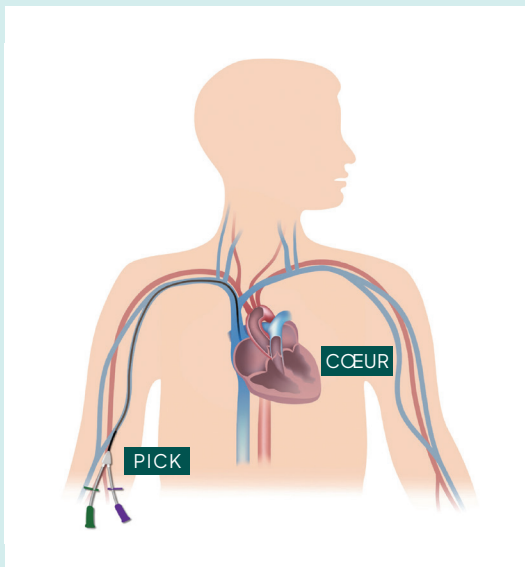

Pourquoi un cathéter PICK ?

Le traitement de votre maladie nécessite l'administration à long terme médicaments par voie sanguine. Les vaisseaux sanguins de votre main ou de votre bras peuvent être endommagés par des ponctions répétées. main ou du bras, ils peuvent être endommagés. Cela rend l'insertion d'un nouveau cathéter périphérique de plus en plus difficile et douloureuse. Il devient alors de plus en plus difficile et douloureux d'insérer une nouvelle perfusion périphérique. En outre l'administration fréquente de médicaments irritants tels que la chimiothérapie, les antibiotiques ou la nutrition parentérale peut endommager la paroi des veines. antibiotiques ou la nutrition parentérale peut endommager la paroi de la veine.

Un cathéter PICK peut éviter ces problèmes car il se déverse dans un gros vaisseau sanguin. Les liquides irritants sont immédiatement dilués par la grande quantité de sang qui circule dans la grosse veine dans laquelle se trouve l'extrémité du cathéter. dans laquelle se trouve l'extrémité du cathéter.

Comment un cathéter PICK est-il est-il placé ?

Il est très important que le cathéter PICK soit placé de manière stérile pour prévenir les infections. L'insertion d'un cathéter PICK se poursuit donc dans la salle d'opération. dans la salle d'opération, ce qui prend environ une demi-heure. Pour ce faire, le bras est couvert de linges stériles et désinfecté jusqu'à l'aisselle. Le site d'insertion du cathéter est anesthésié localement. Le cathéter est inséré dans une veine du bras et avancé au-dessus du cœur. Vous ne sentirez peu ou pas du tout.

A quoi dois-je faire attention avec une sonde PICK ?

- Le sang ne doit être prélevé que sur le bras dans lequel est inséré le cathéter PICK. du bras dans lequel est inséré le cathéter PICK. Le prélèvement de sang par ponction de la veine n'est pas autorisé pour les raisons suivantes la ligne peut être perforée et endommagée.
- La pression artérielle ne doit pas être mesurée sur le bras dans lequel la ligne PICK est insérée. Vous risquez d'endommager ou de bloquer le cathéter.
- Vous pouvez prendre une douche avec le cathéter PICK si vous veillez à ce que l'orifice d'insertion reste sec. Vous pouvez, par exemple, enrouler un film plastique autour de votre bras à cette fin. De plus, évitez autant que possible que le bras ne soit exposé au jet direct de la douche. Si nécessaire, remplacez le sparadrap transparent (Tegaderm®/OPSITE®) par la suite. Il est déconseillé de se baigner et de nager.
- Ne vous soulevez pas sous les aisselles. Cela pourrait entraîner un déplacement de la ligne PICK.
- Vous pouvez continuer à utiliser le bras dans lequel la ligne PICK est placée normalement. Le sport est autorisé, mais il ne faut pas utiliser le bras pour soulever des objets lourds ou faire des pompes.
- **L'activité cérébrale** est mesurée à l'aide d'électrodes placées sur la tête (EEG ou électroencéphalogramme).

Comment se déroule l'entretien de la sonde PICK ?

Tant que vous restez à l'hôpital, l'infirmière s'occupe de la sonde PICK. A domicile, les soins sont pris en charge par les infirmières à domicile. Les fournitures pour les soins hebdomadaires sont fournies par la pharmacie de l'hôpital.

INSTRUCTIONS POUR L'INFIRMIÈRE À DOMICILE :

- Le site d'insertion et la partie externe du cathéter PICK doivent être recouverts d'un pansement protecteur transparent (Tegaderm® ou OPSITE® IV 3000 10*12 cm). Ce pansement doit être changé chaque semaine et plus tôt s'il est souillé, décollé ou humide.
- Le site d'insertion doit être désinfecté chaque semaine avec de la chlorhexidine à 0,5 % dans de l'alcool à 70 % (Pharmawhite Chlohex 0,5 alco coloured 250ml). Pour maintenir le cathéter PICK en place, on utilise un sparadrap spécial, le Statlock®. Il doit être changé toutes les semaines, ou plus tôt si le matériau ne colle plus ou s'il est souillé.
- AVANT et APRÈS chaque utilisation ou manipulation, le cathéter PICK doit être rincé avec une solution saline stérile (NaCl 0,9 %). Après l'administration d'un médicament : 10 ml. Après une prise de sang ou une perfusion nutritionnelle : 20 ml. Si le cathéter PICK n'est pas utilisé, il doit être rincé chaque semaine avec 10 ml en utilisant la méthode start-stop. Injecter 10 ml en pulsant : injecter 2 ml, arrêter ; injecter à nouveau 2 ml, arrêter ; etc. les derniers 2 ml lentement mais sans à-coups, tout en appliquant simultanément la pince de manière à créer une pression positive. de manière à créer une pression positive. Retirer ensuite la seringue tout en maintenant la pression sur le piston.
- Le bioconnecteur doit être remplacé au moins une fois par semaine.

Quand devez-vous nous contacter ?

Occasionnellement, un cathéter PICK et/ou son insertion peuvent des complications. Contactez immédiatement votre médecin traitant dans les dans les cas suivants :

- Si la cathéter PICK est endommagée (trou ou fissure) : fermez la ligne au-dessus de l'endommagement à l'aide d'un clip et contactez l'hôpital. au-dessus de la lésion à l'aide d'un clip et contactez l'hôpital.
- En cas de fièvre (température supérieure à 38,5°C) et/ou de frissons.
- Si l'orifice d'insertion est rouge et/ou douloureux/sensible à la pression.
- En cas d'écoulement de liquide ou de pus au niveau de l'orifice d'insertion.

- En cas d'essoufflement, de toux ou de douleur thoracique.
- Si le liquide ne veut plus passer par la sonde PICK.
- Si la sonde semble glisser vers l'extérieur. Dans ce cas, n'essayez pas de Dans ce cas, n'essayez pas de la repousser, mais fixez-la avec un sparadrap supplémentaire sur le bras.
- S'il y a une douleur dans le cou, le bras ou entre les omoplates pendant l'administration de fluides via la sonde. l'administration de fluides via le cathéter.

Retrait du cathéter PICK

Votre médecin traitant déterminera le moment où le cathéter PICK pourra être retiré être retiré. Pour ce faire, il faut retirer le cathéter et appuyer brièvement sur le site d'insertion. sur le site d'insertion. Le retrait peut être effectué par un médecin ou une infirmière.

Contacts utiles

Des questions sur le matériel médical et les antibiotiques?

Contactez la Pharmacie : 055 23 37 58

Problèmes techniques avec votre sonde ?

Contactez votre infirmière à domicile ou l'infirmière du centre d'hébergement

Des questions d'ordre médical ?

Contactez le médecin traitant

Questions médicales ou logistiques urgentes en dehors des heures d'ouverture ?

Contactez le service des urgences : 055 23 36 66

NOTES

ASBL WERKEN GLORIEUX | CH GLORIEUX

Avenue Stefaan Modest Glorieux 55, 9600 Renaix
T 055 23 30 11 | info@azglorieux.be
www.chglorieux.be

Cette brochure d'information est à titre indicatif et ne remplace en aucun cas une consultation médicale.
Ni le personnel ni les médecins ne peuvent être tenus responsables d'éventuelles erreurs ou omissions.

